


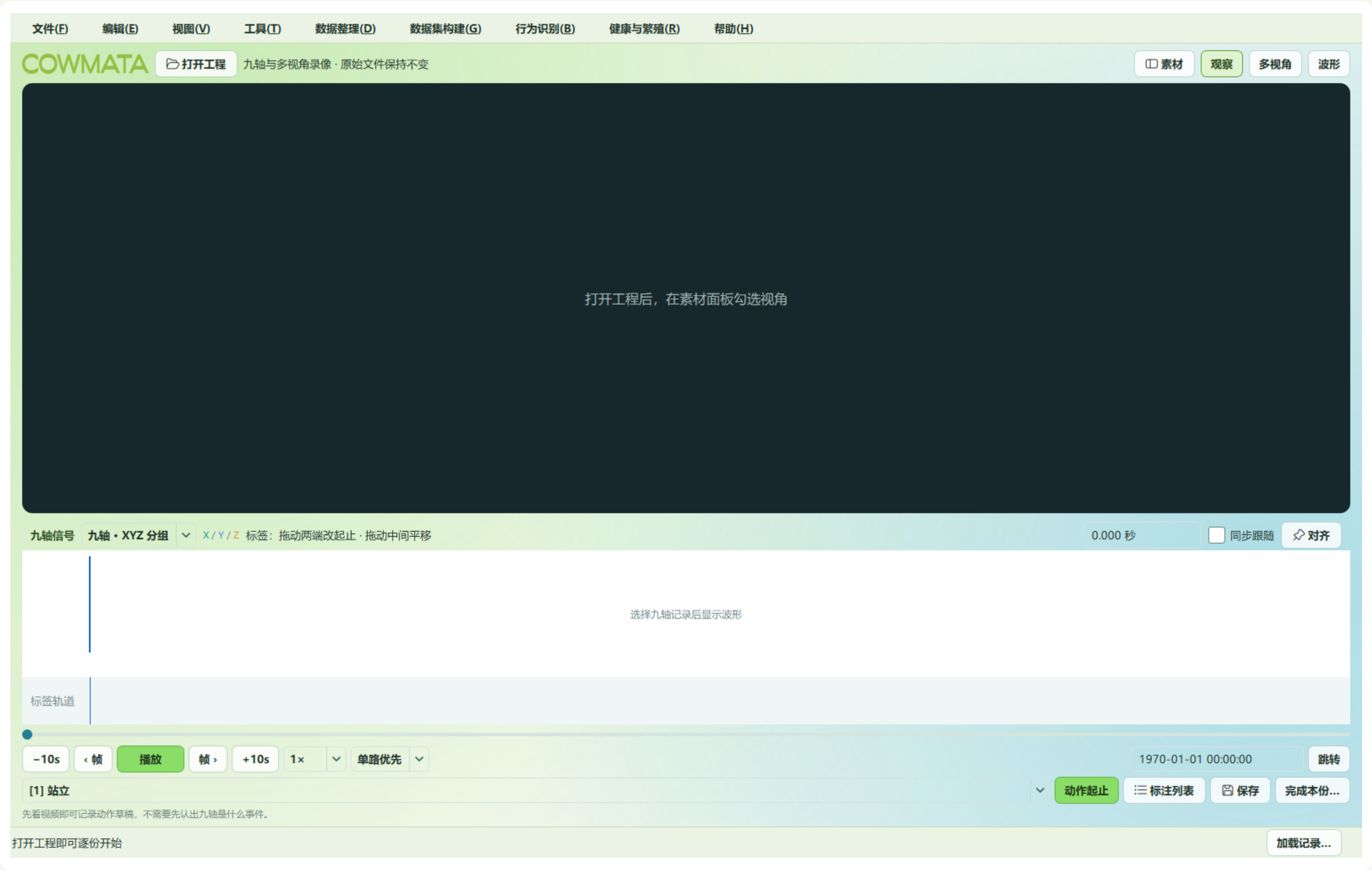

1. 关闭旧版，运行3.5.3安装包，或完整解压便携包后打开COWMATA.exe。
2. 进入“数据整理→数据归类”，选择场景、牧场、类别和保存方式。
3. 点击“一键执行归类”就开始实际处理，无需先完成整批预览。

“仅预览（不复制或移动）” 是可选只读操作，不能当作已经归档。

每个视角填写一个录像目录；可同时添加多个视角，空白行不添加。

视角01	.:\\2-学术\\2-项目\\园上园项目\\牛尾环项目\\算法迭代版本\\COWMATA_20260912\\qa\\353\\acceptance\\attach_video-copy\\incoming\\left	<button>浏览...</button>
视角02	2-学术\\2-项目\\园上园项目\\牛尾环项目\\算法迭代版本\\COWMATA_20260912\\qa\\353\\acceptance\\attach_video-copy\\incoming\\right	<button>浏览...</button>
视角03	粘贴完整目录路径，或点击浏览	<button>浏览...</button>
视角04	粘贴完整目录路径，或点击浏览	<button>浏览...</button>
视角05	粘贴完整目录路径，或点击浏览	<button>浏览...</button>
视角06	粘贴完整目录路径，或点击浏览	<button>浏览...</button>
视角07	粘贴完整目录路径，或点击浏览	<button>浏览...</button>
视角08	2-学术\\2-项目\\园上园项目\\牛尾环项目\\算法迭代版本\\COWMATA_20260912\\qa\\353\\acceptance\\attach_video-copy\\incoming\\back	<button>浏览...</button>

添加所填目录

1. 点击“批量添加视角01～08目录”，分别填写各视角的完整路径。
2. 可同时填写多个视角，空白行不添加；同一视角的更多目录可以继续追加。
3. 来源递归进入子文件夹。视频先按后缀筛选，九轴按原始JSON结构识别。

非视频后缀不进入视频识别和列表；九轴、标签按各自规则处理。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过
开始时间：待确认 视角：
来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4
归类目标：
处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。



保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

- 按上方选择直接一键执行，多个视频同时识别，先识别完成的立即传输。
- “正在写入”表示尚未完成；“已归档”才表示目标文件存在并通过核对。
- 选择已归档行，点击“打开实际目标目录”查看文件，完整路径在下方记录区。

视频目录为Video/日期/视角01 ~ 08/开始时间；不绑定单头牛的设备、耳标或记号。



1. 优先读取支持的录像流内绝对时间，没有时再识别开始画面。
2. 首帧读不清会尝试开头约1、2、4秒的画面，扣除媒体偏移回推开始秒。
3. 示例中后续画面显示23:09:28，实际命名开始秒回推为23:09:27。

邻近帧回推为秒级估计，不等于整段同步已核验；始终无可靠时间则保留并自动跳过。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\mixed-move\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

正在识别并实际归档；只有已归档项代表目标文件已写入。

实际已归档 1 项 • 正在写入 0 项 • 已删除 0 项 • 异常保留 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	开始时间 / 日期	来源文件
1	left	自动跳过						broken.mp4
2	left	已归档		视角01			2026-08-04 ...	mb0000.mp4

状态: 自动跳过
开始时间: 待确认 视角:
来源: E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\mixed-move\incoming\left\broken.mp4
归类目标:
处理说明: 媒体格式无法确认，保留原文件待确认

已处理 1 / 5 · E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\mixed-move\测试牧场\怀孕\孕晚期\Video\2026-08-04\视角01\2026-08-04_23-09-27.mp4

20%

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 九轴已归类时，仅按已有九轴日期补充全天、多视角录像。
2. 九轴与视频一起整理时，添加两类来源，九轴保持其设备目录规范。
3. 复制保留来源；同盘移动迁移实际文件；跨盘按校验复制保留来源。

九轴改名时同步更新标签引用路径，标注内容保持一致。同名不同内容不覆盖。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

保存并暂停当前工程


执行归档

暂停整理

打开整理后的工程


1. 暂停后，已完成文件保留；在任务记录中恢复原任务并继续。
2. 关闭数据整理子窗口会停止后台任务，主窗口随后可以正常保存退出。
3. 希望后台继续时可最小化整理窗口；强制停止时未完成临时文件供恢复使用。

不丢弃未保存标签来强行退出；关闭前会保留任务记录，异常原因可在完整记录中查看。

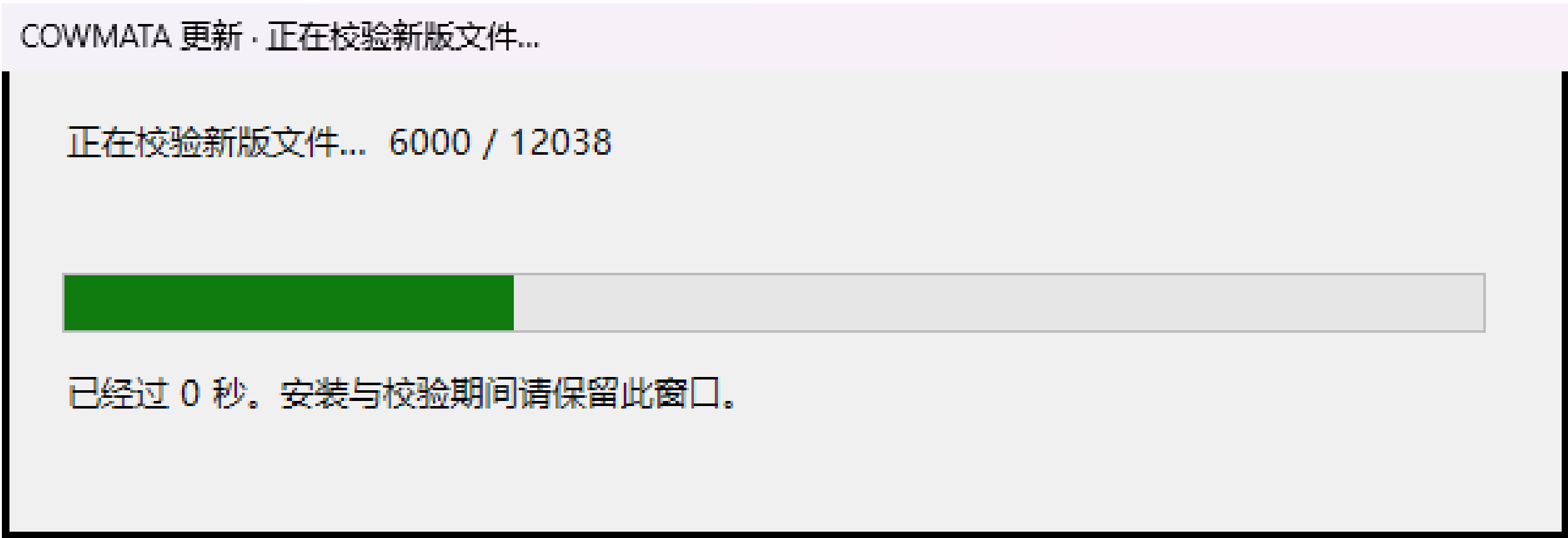

- 1. 更新退出后会显示独立窗口，报告等待退出、安装、校验和启动等阶段。
- 2. 校验时显示已检查文件数及经过时间，避免长时间无反馈。
- 3. 新版校验通过后先启动，再后台清理旧版；更新后这一次启动不重复联网检查。

此图为进度界面演示。旧版更新器的首次迁移不能追溯改变，本次建议直接运行3.5.3安装包。

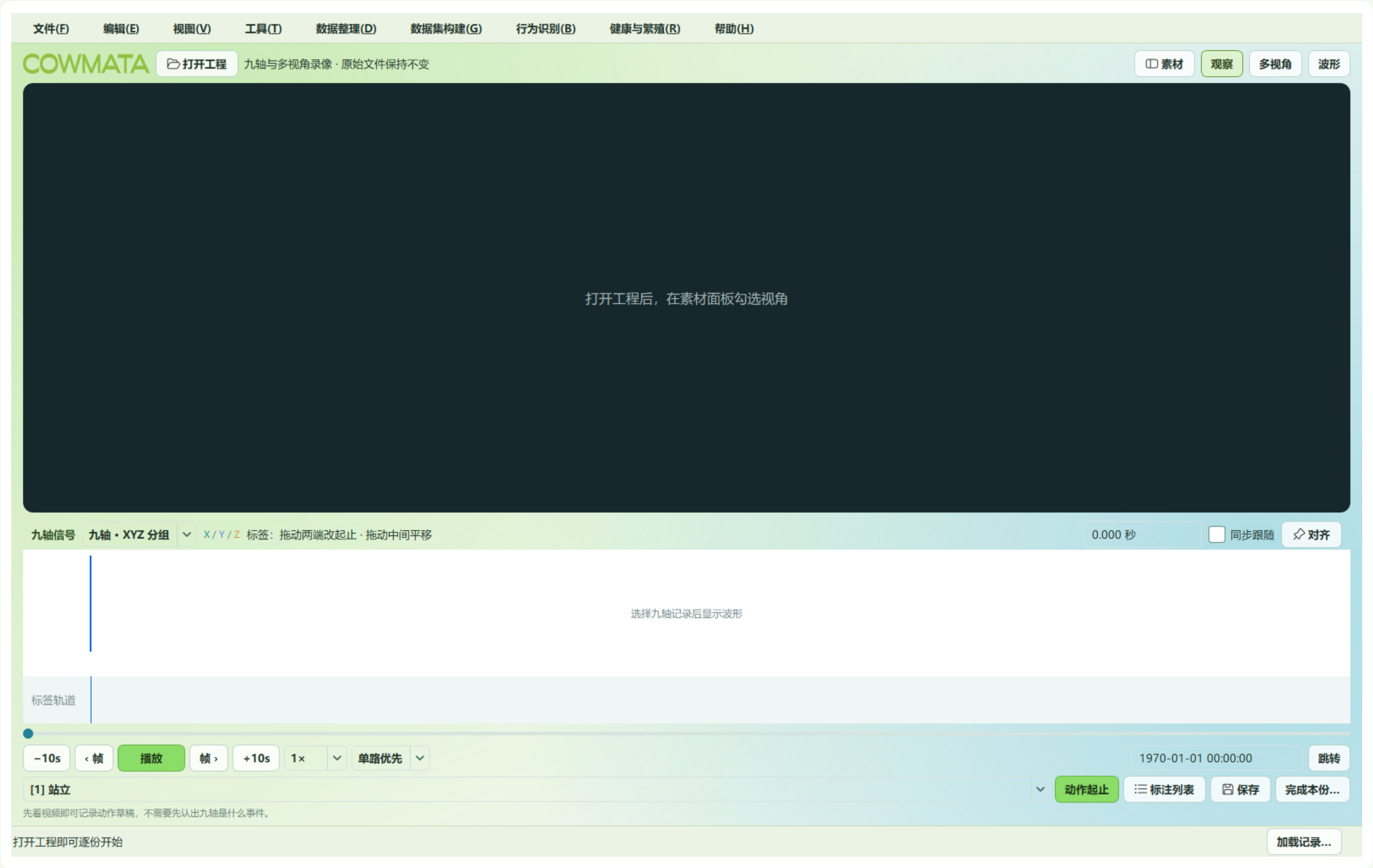

1. 启动时先显示加载反馈，界面准备好后进入标注工作台。
2. 普通联网检查遇到网络或SSL异常时，可以选择进入软件，继续离线工作。
3. 在“帮助→关于” 查看当前版本、更新信息和本完整图文教程。

本机更新后启动界面实测约3秒；磁盘和系统环境不同，不能承诺所有设备固定耗时。

当前牧场：实测牧场
请确认这是本批数据所属牧场。

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.3旧标签整理验证\单日实测-161520\实测牧场

数据类别	怀孕	▼
孕期阶段	孕晚期	▼
原始数据类型	九轴数据 Motion	▼
采集日期（单选）	2026-08-04	▼

仅加载所选日期九轴和对应录像；前日跨午夜录像按覆盖时间补充。其他日期不扫描。

确认牧场并打开该日

Cancel


- 打开工程时先选择牧场根目录，再选择类别和孕期、Motion 及一个采集日期。
- 只加载当天九轴与对应录像；必要时补入前一天开始、跨午夜覆盖当天的录像。
- 日常标签保存到“标注工程 / Motion / 日期 / 设备-耳标-现场号”，不再维护两套日常标签。

10

单份文件、跨盘配对与保存

COWMATA Annotator 3.5.3


3.5 完整工作流程（通用功能·历史截图）

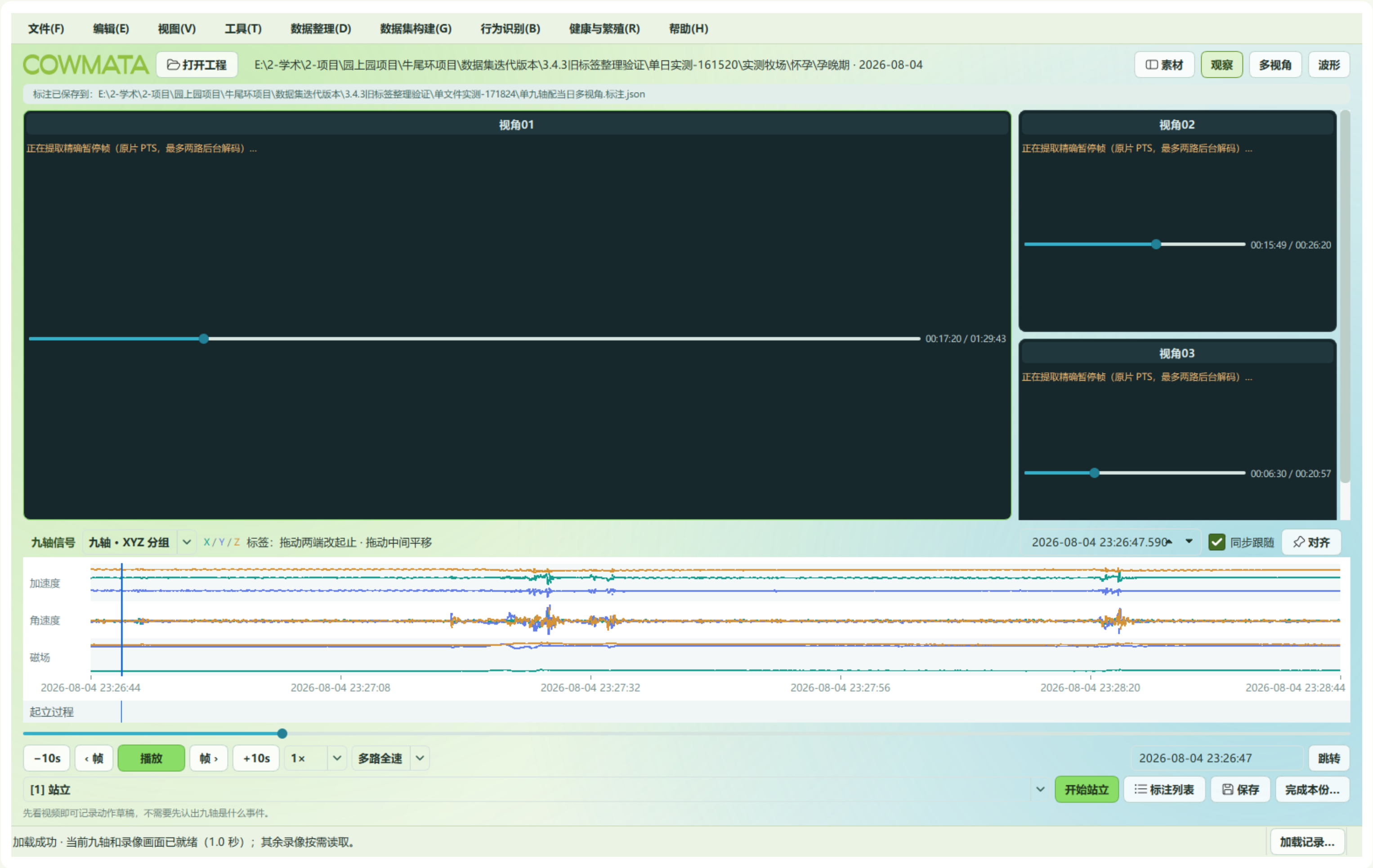

1. 文件菜单选择单个九轴，或选择一个视频并指定配对九轴；支持素材分布在不同磁盘。
2. 单九轴会查找当天对应录像，第一路优先显示，其余视角随后加载。
3. 单文件模式点击保存时，明确选择成果路径；取消选择会保留当前工作，随后仍可保存。

独立分享使用数据集构建中的“标注分享与片段”；保存后可打开成果文件回看。

已解码实际位置 0.000 秒。框选时间戳后可识别，也可直接输入看到的读数。

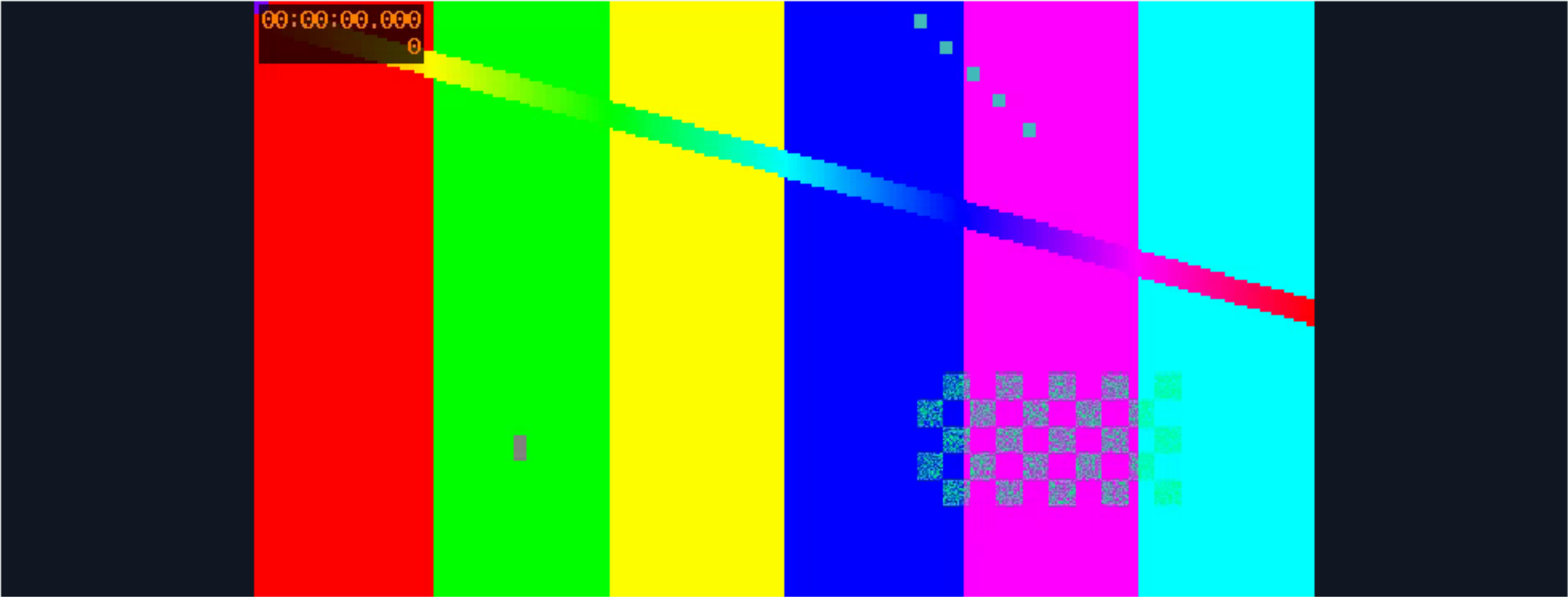

文件内位置

0.000 秒

画面读数

2026-09-04 20:40:00

逻辑视角名称

右1

读取这个位置的画面

识别框选区域 / 四角

确认当前读数


	播放位置（秒）	工确认的画面时	来源
1	0.000	2026-09-04 ...	人工确认

Save

Cancel

1. 读取实际画面，再填写其日期时间并点击“确认当前读数”；不要把请求位置当成实际帧。
2. 保存一个读数即可粗定位浏览。需要确认区间真值时，在较远位置再核对第二个读数。
3. 保存后播放器立即重新定位，后台索引不会覆盖刚保存的人工结果。

单点外推和双点范围外仍是待核区间，可浏览但不能自动作为已确认视频证据。

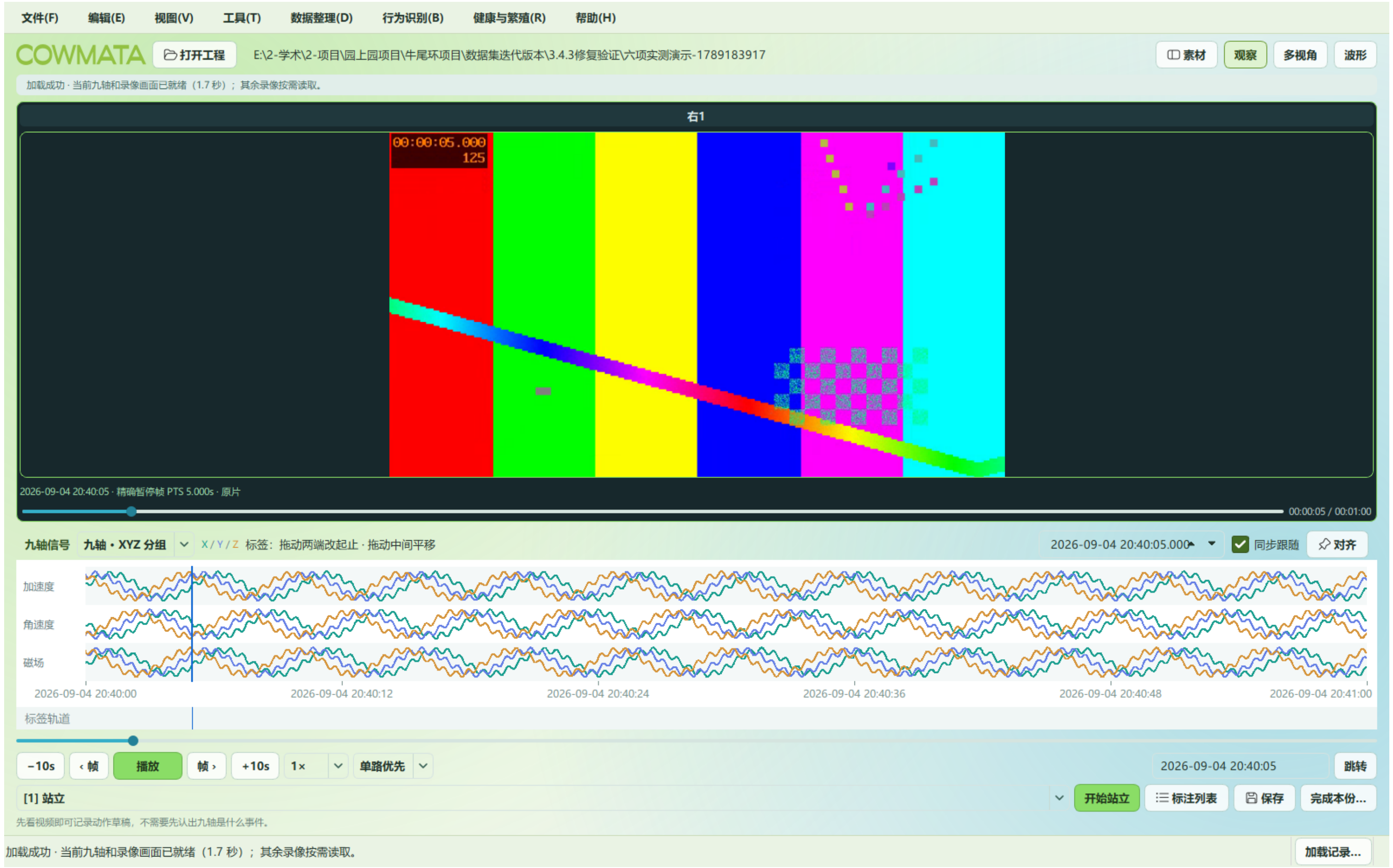


1. 同一路只显示稳定视角名，不再因分辨率或时间戳角落而重复。
2. 画面下方显示文件内位置/完整文件时长，不是已核验片段的长度。
3. 通用播放器误报时长时，可在数据整理菜单另存标准 MP4 副本，原片不变。

标准 MP4 功能仅导出视频画面，音频和私有包保留在原文件。每份按真实流内时间和帧数核对，不预设一小时。


13

按时间排查，校准不移动旧标签

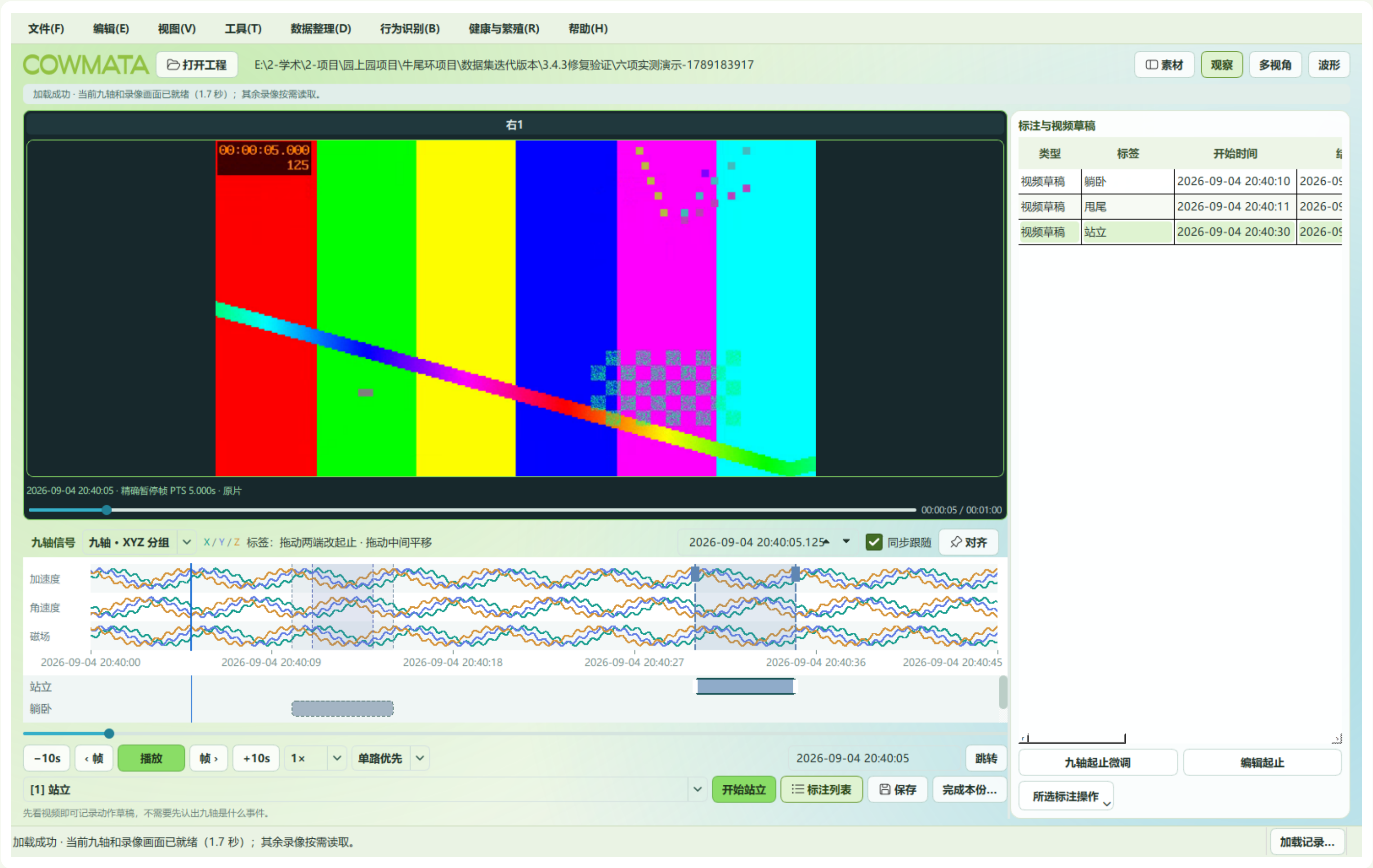

1. 打开标注列表，视频草稿和九轴标签统一按开始时间排序，选中项保持不变。
2. 手动对齐后，已有标签在九轴上的起止位置固定；录像对应关系更新。
3. 受影响标签标为待复核，回看后更新证据；误操作可撤销。

原标注与同步修订历史保留。界面上的绝对时间随校准变化不代表九轴起止被移动。

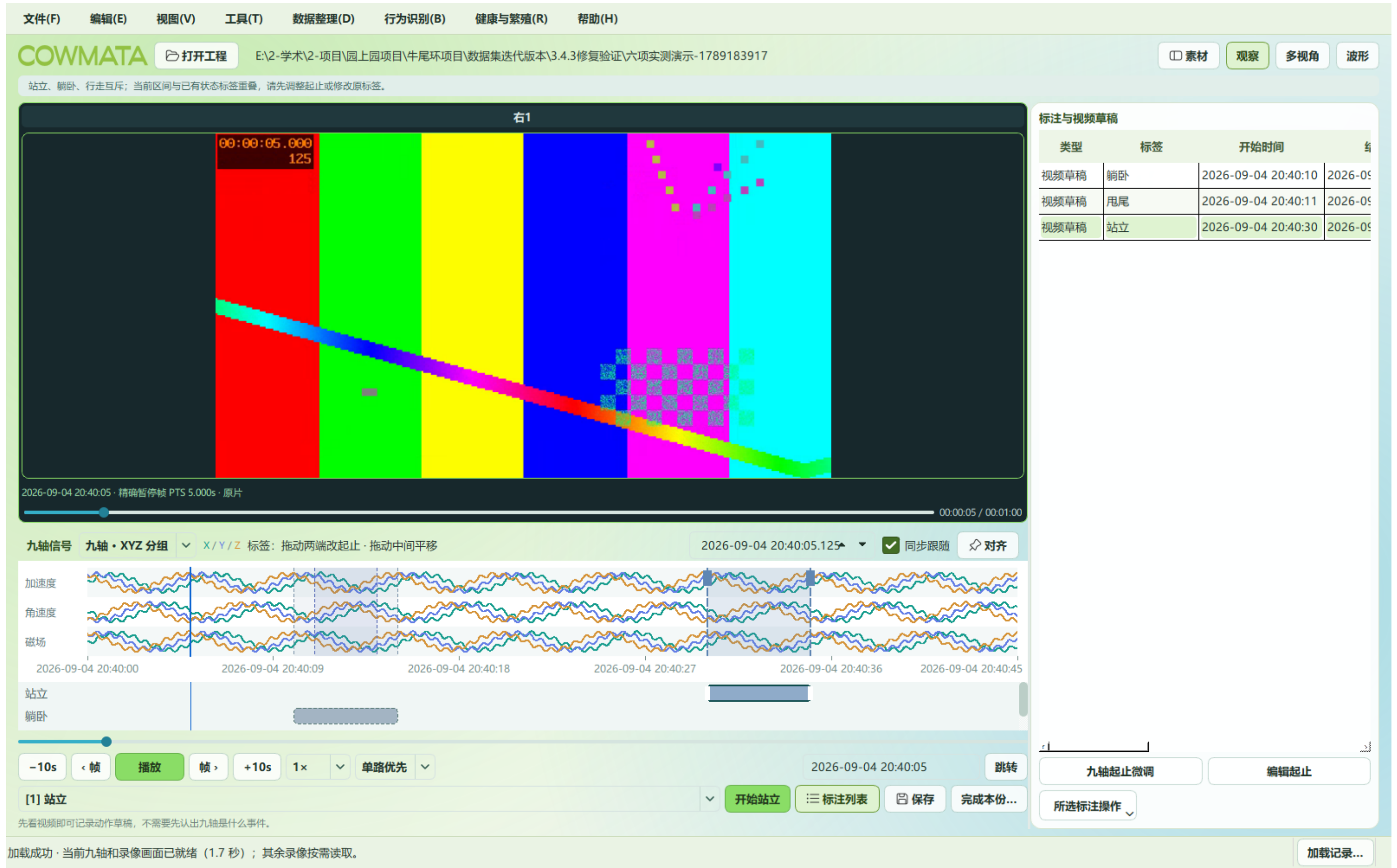

标注与视频草稿

类型	标签	开始时间	结束时间
视频草稿	躺卧	2026-09-04 20:40:10	2026-09-04 20:40:11
视频草稿	甩尾	2026-09-04 20:40:11	2026-09-04 20:40:12
视频草稿	站立	2026-09-04 20:40:30	2026-09-04 20:40:31

- 三种状态的起点不得放在任何已存在的站立、躺卧、行走区间内；边界可相接。
- 结束点或整段区间发生冲突时，本次结束不生效；重新定位到合法位置后再结束。
- 历史遗留的无效起点，可点“取消本次动作”后重标。点事件仍可与状态区间同时记录。

编辑起止、拖动标签或选区标注也检查重叠；已有标签保留，操作可撤销。

15 怀孕资料明确选择孕期

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程 选择目录...

① 数据审查② 数据归类③ 异常报告

素材类型来源绝对路径（文件或目录）固定视角

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。耳标取前5位数字，余下去横线为现场标记；倒序取唯一5位耳标，歧义拦截。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

可留空：自动读取真实采集日期

至

可选：仅用于核对开始日期范围

数据类别

怀孕

孕期阶段

孕晚期

牧场目录

扬大_高邮牧场

保存方式

复制，保留原件

PPG

已预留：按实际日期创建 PPG；当前不参与波形或标注计算

异常处理

☐ 仅归档通过校验项，异常原件保留并列入报告

设备与实验说明

例如：沿用现有绑定；设备用于孕晚期行为观察。未知信息留空，不自动生成事件。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

旧标签与算法数据集...

尚未审查 · 原始文件保留

设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期

其他目录可同时标注；同目录须先保存并暂停。按所选方式归档，保留校验与恢复记录。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

- 1. 数据整理 → 数据归类，选择怀孕后再选择孕早期、孕中期或孕晚期。
- 2. 产犊保持一个类别；PPG 目录和字段自动预留。日期按真实采集时间生成。
- 3. 旧标签整理可直接点击“旧标签与算法数据集”，进入专用迁移窗口。

不能根据行为标签或产犊日期自动推断已有资料的孕期。未确认的旧资料保留原位置。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

15 / 56

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

旧标签 CSV / BORIS

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\labels\546C50CA07D5-21100-10\one.events.csv

添加目录...

原始九轴来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\incoming\546C50CA07D5-2110010\one.json

添加目录...

资源或牧场目录

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出

选择...

牧场名称

演示牧场

类别与孕期

怀孕 / 孕晚期

▼

先预览，再迁移。原始标签、来源与时间字段保留；牛号冲突待核，不进入训练。产犊统一归在产犊目录；人工干预和数据缺失保留为元数据。未知时间不会补造。

审查并预览旧标签

执行迁移并生成新版标注

预览完成，请核对数量。执行后生成可继续编辑的工程和单文件标注；待核项保留。

来源九轴文件：1
去重后九轴文件：1
旧标签文件：1
已匹配事件：1
待核条目：0
牛号冲突：0

100%

暂停任务

打开结果目录

1. 逐行添加旧 CSV/BORIS 标签和原始九轴来源，填写牧场或资源目录及本批类别。
2. 点击“审查并预览旧标签”，核对已匹配事件、未匹配条目和牛号冲突。
3. 有冲突的原行保留待核，不凭目录或别的牛的数据补造身份与时间。

图中采用隔离演示数据测试实际后台任务；不会混入科研数据集。

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

旧标签 CSV / BORIS

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\labels\546C50CA07D5-21100-10\one.events.csv

添加目录...

原始九轴来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\incoming\546C50CA07D5-2110010\one.json

添加目录...

资源或牧场目录

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出

选择...

牧场名称

演示牧场

类别与孕期

怀孕 / 孕晚期

▼

先预览，再迁移。原始标签、来源与时间字段保留；牛号冲突待核，不进入训练。产犊统一归在产犊目录；人工干预和数据缺失保留为元数据。未知时间不会补造。

审查并预览旧标签

执行迁移并生成新版标注

任务完成。结果目录含来源索引、复核记录与校验清单。

保留事件：1
新版标注文件：1
去重后九轴文件：1
待核条目：0
结果目录：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出\演示牧场\怀孕\孕晚期

100%

暂停任务

打开结果目录

- 预览确认后执行迁移，完成时会列出保留事件与新版标注文件数量。
- 标注工程/annotations 保存可编辑成果；导出标注目录保存独立单文件。
- 点击“打开结果目录”，再通过主窗口打开该类别工程或历史标注。

原始标签、原始九轴与来源哈希保留。修改过的人工成果不能被旧标签覆盖。

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

新版标注来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\怀孕\孕晚期
E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\产犊

添加目录...

新数据集目录

\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\算法数据集\下一批次示例

选择...

历史算法数据集（可选）

3\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\算法数据集\历史数据集\事件识别20260906

选择...

☐ 保留旧代理负样本用于训练；不作为验证、测试真值

使用当前已保存标注，优先于旧导出快照。原始九轴保持完整，窗口由算法适配器生成。
起立、卧倒、排尿、抬尾、甩尾与综合决策共用母标签和按牛划分。未标注区间是未知，不能自动当负样本。
牛号冲突、未复核标注列入复核表；PPG 继续保留占位。

从标注生成算法数据集

任务完成。结果目录含来源索引、复核记录与校验清单。

保留事件：1
新版标注文件：1
去重后九轴文件：1
待核条目：0
结果目录：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出\演示牧场\怀孕\孕晚期

100%

暂停任务

打开结果目录


1. Ctrl+S 保存，然后逐行选择类别工程；新数据集目录必须尚不存在。
2. 可选历史事件识别数据集。只有明确沿用旧方案时，才勾选代理负样本仅用于训练。
3. 点击生成；后台完成后按各算法 readiness.json 核对输入条件。

当前标注优先于旧导出快照。同一牛共享划分，未标注不自动等于负例。



1. 缺少唯一九轴对应的产犊时刻，使用绝对时间单文件保留并可独立回看。
2. 未知时间仅保留原行，不创建虚假的事件、九轴波形或源文件。
3. 完全娩出 T0、露蹄及人工干预分别保留；产犊目录不按引产方式嵌套分类。

此页为本次真实标注的只读回看；无匹配视频或九轴时会如实提示。

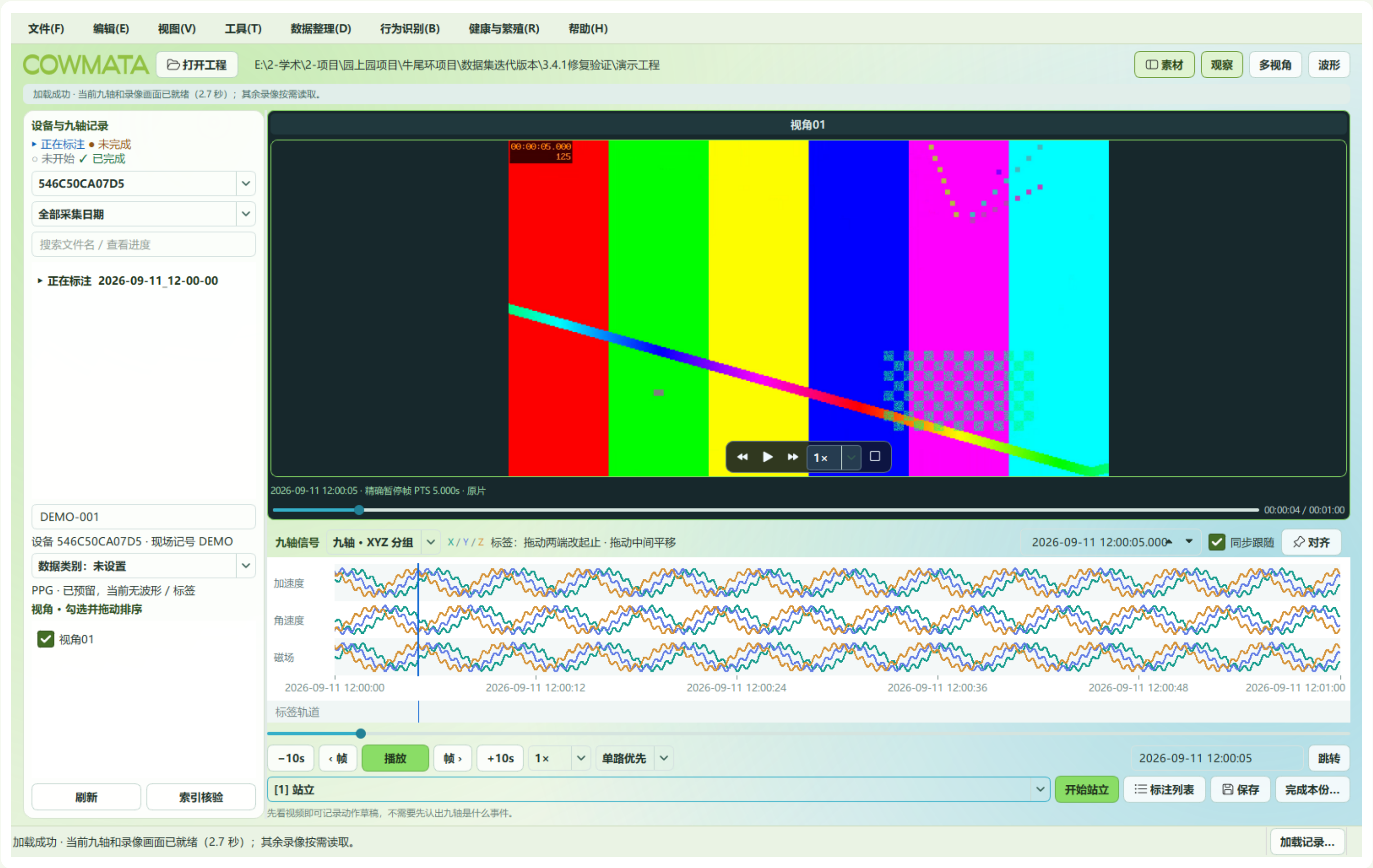

1. 完整解压便携包，双击 COWMATA.exe；启动检查后打开工程。
2. 选择倍速或行为后，无须再点九轴，直接按空格播放或暂停。
3. 牛号、日期、备注等输入框仍可正常输入；下拉列表展开时先完成选择。

请保留整个便携目录及其依赖。截图为生成的演示视频与波形。

21 开始与结束不能是同一时刻

文件(F)编辑(E)视图(V)工具(T)数据整理(D)行为识别(B)健康与繁殖(R)帮助(H)

COWMATA

打开工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.1修复验证\演示工程

素材观察多视角波形

结束时间必须晚于开始时间。请播放或定位到结束画面后再结束；当前起点已保留。

设备与九轴记录

正在标注

未完成

未开始

已完成

546C50CA07D5

全部采集日期

搜索文件名 / 查看进度

正在标注

2026-09-11_12-00-00

DEMO-001

设备 546C50CA07D5 · 现场记号 DEMO

数据类别: 未设置

PPG · 已预留，当前无波形 / 标签

视角 · 勾选并拖动排序

视角01

刷新

索引核验

视角01

00:00:05.000

125

2026-09-11 12:00:05 · 精确暂停帧 PTS 5.000s · 原片

00:00:04 / 00:01:00

九轴信号

九轴 · XYZ 分组

X / Y / Z

标签: 拖动两端改起止 · 拖动中间平移

2026-09-11 12:00:05.000

同步跟随

对齐

加速度

角速度

磁场

2026-09-11 12:00:00

2026-09-11 12:00:12

2026-09-11 12:00:24

2026-09-11 12:00:36

2026-09-11 12:00:48

2026-09-11 12:01:00

标签轨道

-10s

帧

播放

帧

+10s

1x

单路优先

2026-09-11 12:00:05

跳转

[1] 站立

结束站立

标注列表

保存

完成本份...

取消本次动作...

正在记录: 站立 · 起点 2026-09-11 12:00:05 · 按 1 或“结束站立”结束

加载成功 · 当前九轴和录像画面已就绪（2.7 秒）；其余录像按需读取。

加载记录...

- 在起点暂停并点击开始；播放、逐帧或跳转到结束画面，再点击结束。
- 同一时刻重复点击会提示，起点保留，不生成零时长区间。
- 点事件只记录一个时刻，无须第二次结束。

遇到同帧提示后直接继续播放，无须重新开始动作。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

21 / 56

22

选中最新标签并直接拖动



文件(F)编辑(E)视图(V)工具(T)数据整理(D)行为识别(B)健康与繁殖(R)帮助(H)

COWMATA

打开工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.1修复验证\演示工程

草稿九轴边界已调整；请回看并补充画面证据，再确认真值。

设备与九轴记录

正在标注

未完成

未开始

已完成

546C50CA07D5

全部采集日期

搜索文件名 / 查看进度

正在标注 2026-09-11 12-00-00

DEMO-001

设备 546C50CA07D5 · 现场记号 DEMO

数据类别: 未设置

PPG · 已预留，当前无波形 / 标签

视角 · 勾选并拖动排序

视角01

刷新索引核验

视角01

00:00:19.000

475

2026-09-11 12:00:19 · 精确暂停帧 PTS 19.000s · 原片

00:00:19 / 00:01:00

九轴信号九轴 · XYZ 分组X/Y/Z 标签: 拖动两端改起止 · 拖动中间平移2026-09-11 12:00:19.000同步跟随对齐

加速度

角速度

磁场

2026-09-11 12:00:002026-09-11 12:00:072026-09-11 12:00:152026-09-11 12:00:222026-09-11 12:00:30

站立

-10s< 帧播放帧 > +10s1x单路优先

[E] 起立过程开始起立过程标注列表保存完成本份...

动作已保存为视频草稿；同步核对应可确认对应九轴范围。

选择对应人工标签

人工标注: ① 双击算法结果定位(无结果也可自行浏览)；② 点击上方按钮选择行为；③ 观察视频，在动作开始、结束画面分别点击下方动作按钮；④ 回看并确认。此按钮只选类型，不会自动生成标签。

算法与质量详情

返回标注布局

加载记录...

按需待命 · 仅处理当前九轴所需录像；未检索部分不等于无录像

1. 双击算法结果定位；没有结果也可自行浏览视频。
2. 点击选择对应人工标签，下方行为类型和动作按钮随之更新。
3. 观察视频并记录开始、结束；核对后确认。该按钮不会自动生成标签。

算法结果提供定位线索；人工动作区间由用户独立观察确定。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

- 选择牧场、类别、来源和复制或移动方式；多个视角可批量填入。
- 直接点击 “一键执行归类” ， 完成一条就实际归档一条；仅预览不会写入文件。
- 任务完成后打开整理后的工程进行标注，已归档文件可以从实际目标目录核对。

未知时间或异常文件保留并自动跳过，不阻断正常项。九轴、标签与视频分别按既定规则处理。

25

保存、导出与再检查



1. Ctrl+S 保存工程；文件菜单导出当前成果，保存一个 .标注.json。
2. 历史回看可检查导出成果；修改时回到原工程。
3. 交付时带上证据目录，分别备份原始数据与标注工程。

演示截图中仍未确认的草稿不会自动变为已核验真值。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 选择牧场、类别、来源和复制或移动方式；多个视角可批量填入。

2. 直接点击“一键执行归类”，完成一条就实际归档一条；仅预览不会写入文件。

3. 任务完成后打开整理后的工程进行标注，已归档文件可以从实际目标目录核对。

未知时间或异常文件保留并自动跳过，不阻断正常项。九轴、标签与视频分别按既定规则处理。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

26 / 56

27 九轴目录必须写对三段

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\待规范目标

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C50CA07E8-y1-22207	视角01

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

正常健康

设备与实验说明

例如：沿用现有绑定；设备用于孕晚期行为观察。未知信息留空，不自动生成事件。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 1 项 • 可归类 0 项 / 0.00 GiB • 命名待规范 1 项 • 待核对 0 项 • 拦截 1 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	546C50CA07E8-y1-22207	已拦截	546C50CA07E8-22207-y1	546C50CA07E8				E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C5...

设备命名需先规范：请逐项核对建议并人工修改来源目录后重新审查。本批禁止执行，有效九轴原件保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

- 目录格式：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
- 设备号为12位十六进制；耳标只用数字并保留前导0；现场记号限英文字母/数字，保留大小写。
- 看到“命名待规范”先核对建议，人工改好来源目录后重选。工具不会猜牛号或自动改名。

同一设备换日期、换牛可以复用；每条记录分别保留身份。已有工程不强制迁移目录。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

27 / 56

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

- 1. 选择牧场、类别、来源和复制或移动方式；多个视角可批量填入。
- 2. 直接点击 “一键执行归类” ， 完成一条就实际归档一条；仅预览不会写入文件。
- 3. 任务完成后打开整理后的工程进行标注，已归档文件可以从实际目标目录核对。

未知时间或异常文件保留并自动跳过，不阻断正常项。九轴、标签与视频分别按既定规则处理。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

28 / 56

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

先只读审查所选来源（未添加来源时审查上方工程）。不全量读取录像，不做 OCR、转码或切片。系统临时文件和空文件可先预览隔离；异常九轴与已有标签保留，不能按“废料”直接删除。

开始数据审查

预览隔离清理

共 6 项 · 可归类 5 项 / 0.01 GiB · 命名待规范 0 项 · 待核对 0 项 · 拦截 0 项 · 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. “数据审查”为可选的只读检查，帮助查看九轴结构和目录问题。
2. 视频归类直接一键执行，自动尝试时间回退，异常保留并跳过。
3. 查看完整审核记录或导出报告即可了解原因，不必逐条确认后才处理正常录像。

正式行为标注仍需核对视频真值，不能把自动归类等同于已核验标签。

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

报告列出临时文件、空文件、九轴结构异常、路径冲突及跨盘拦截。来源、目标、状态和任务记录均可追溯。绑定与实验表沿用原记录；参加某实验不等于已发生某事件，不自动标注正负样本。

导出审查报告 CSV...

继续上次整理任务

载入整理任务...

打开任务记录

共 6 项 · 可归类 5 项 / 0.01 GiB · 命名待规范 0 项 · 待核对 0 项 · 拦截 0 项 · 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 在“③ 异常报告”查看来源、状态和修改建议；横向滚动可看完整列。
2. 导出审查报告 CSV，交给采集人员逐项核对。
3. 暂停或意外中断后，用“继续上次整理任务”或“载入整理任务”恢复。

临时与空文件移到工程外隔离区，任务记录保留去向；不要自行删除任务记录。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

100%

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 选择牧场、类别、来源和复制或移动方式；多个视角可批量填入。

2. 直接点击 “一键执行归类” ， 完成一条就实际归档一条；仅预览不会写入文件。

3. 任务完成后打开整理后的工程进行标注，已归档文件可以从实际目标目录核对。

未知时间或异常文件保留并自动跳过，不阻断正常项。九轴、标签与视频分别按既定规则处理。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

31 / 56

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\测试牧场\怀孕\孕晚期

选择目录...

一键执行归类

查看完整审核记录

展开整理选项

打开实际目标目录

选好来源后直接点击一键执行归类；识别一条、实际归档一条。

实际已归档 3 项 • 自动跳过 1 项 • 保留 0 项

	状态	开始时间 / 日期	视角	来源文件	归类目标	审查说明
1	自动跳过			broken.mp4		媒体格式无法确认，保留原文件待确认
2	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角01	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
3	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角02	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...
4	已归档	2026-08-04 23-09-27	视角08	mb0000.mp4	2026-08-04_23-09-27.mp4	已归档：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项...

状态：自动跳过

开始时间：待确认 视角：

来源：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\算法迭代版本\COWMATA_20260912\qa\353\acceptance\attach_video-copy\incoming\left\broken.mp4

归类目标：

处理说明：媒体格式无法确认，保留原文件待确认

整理完成：实际归档 3 项，12.86 秒；可打开实际目标目录核对。 待核实 1 项，见整理异常.csv；原件保留。

保存并暂停当前工程


执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 选择牧场、类别、来源和复制或移动方式；多个视角可批量填入。
2. 直接点击 “一键执行归类” ， 完成一条就实际归档一条；仅预览不会写入文件。
3. 任务完成后打开整理后的工程进行标注，已归档文件可以从实际目标目录核对。

未知时间或异常文件保留并自动跳过，不阻断正常项。九轴、标签与视频分别按既定规则处理。

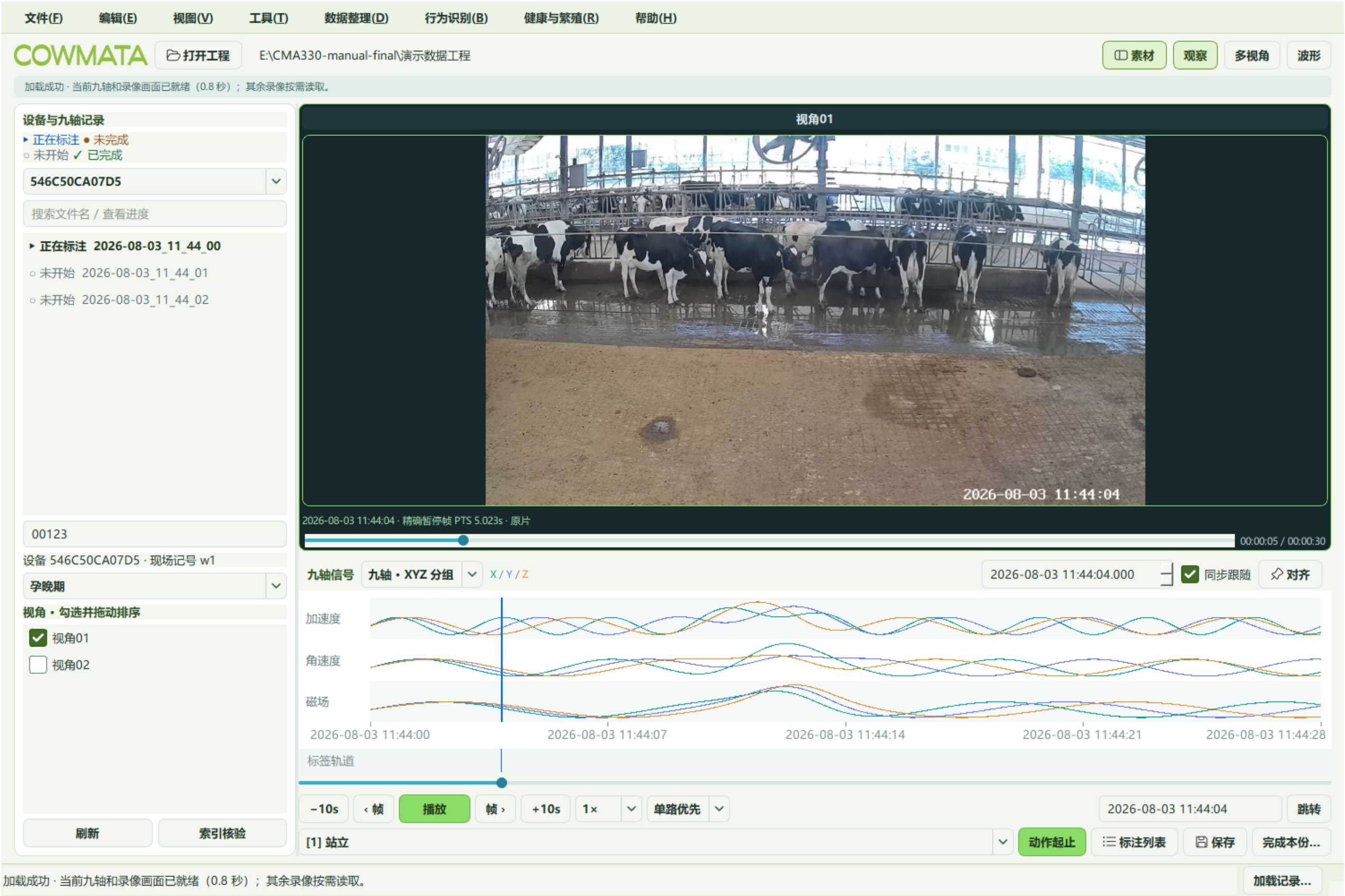

1. 左侧选设备与九轴记录，核对牛耳标、现场记号和类别。
2. 当前九轴和匹配录像就绪后会提示“加载成功”；其余记录按需读取。
3. 勾选视角开始观察；顶部可切换“观察、多视角、波形”。

本教程使用真实牛舍录像短片和合成九轴，演示绑定与标签仅用于操作说明，不作研究真值。

悬停“状态 / 开始时间”查看下一步。后台抽查录像时间不代表已匹配当前牛；匹配时间后仍需人工核对画面中的牛。

	相对路径	类型	状态	开始时间 / 设备	说明
1	视角01/待核对录像.mp4	video	未索引	待确认	按需任务已切换，稍后可继续
2	视角02/时间不清晰.mp4	video	待复核	待确认	时间戳识别失败：可浏览原片，需框选或输入人工读数
3	九轴/546C50CA07D5-00123-w1/2026-08-03/演示.json	imu	未索引		

核验所选视频时间 / 框选 ROI

重新建立所选视频索引

Close

待确认：录像开始时间尚未可靠读出或索引尚未完成，不等于视频损坏。
下一步：先选择要标注的九轴，后台会按其时间查找录像；也可选中此行，点击“重新建立所选视频索引”。
状态变为“可用 / 待复核”后，才能点击“核验所选视频时间 / 框选 ROI”人工校准。
按需任务已切换，稍后可继续

1. 点“索引核验”，悬停状态或开始时间，查看原因与下一步。
2. “待确认”是录像时间未确认，不等于损坏；先选择九轴，或选录像重建索引。
3. 状态变为可用 / 待复核后，点“核验所选视频时间 / 框选 ROI”，核对画面时间。

本页指正式标注同步的待确认；视频归类中的未识别文件会自动跳过，不要求逐项确认。

00:59:25 整理完成：6 项，1.25 秒；文件身份校验与任务记录已保存。

00:59:27 正在后台读取九轴数据，保留真实采样时间及缺口...

00:59:27 正在轻量清点文件与恢复标注进度；仅处理当前九轴及对应录像，不自动完整索引整个工程。

00:59:27 正在清点工程目录（不读取录像正文） ...

00:59:27 正在标注 2026-08-03_11_44_00 · 新记录；切换时自动保存并保留为未完成。

00:59:28 素材 5 · 可用 5 · 待复核 0 · 未索引 0 · 异常 0 · 缺失 0

00:59:28 按需待命 · 仅处理当前九轴所需录像；未检索部分不等于无录像

00:59:28 加载成功 · 当前九轴和录像画面已就绪（0.8 秒）； 其余录像按需读取。

Close

扩大当前检索

完整索引...

暂停检索

刷新素材 F5

素材核验...

新建拷贝批次...

内容核验...

归档核验...

- 1. 状态栏显示不全时，点右下“加载记录...”查看并复制完整路径、进度与提示。
- 2. 在“工具 → 录像索引”可扩大当前检索、启动完整索引、暂停检索或刷新素材。
- 3. 素材改动后再刷新；大批录像的内容核验和完整索引需等待后台完成。

同一时间范围不会因保存或位置刷新从头重识别；难读画面会保留待复核，继续检查其他录像。

已解码实际位置 0.000 秒。框选时间戳后可识别，也可直接输入看到的读数。



文件内位置

0.000 秒

画面读数

2026-08-03 12:44:58（日期必须人工确认）

逻辑视角名称

视角01

读取这个位置的画面

识别框选区域 / 四角


确认当前读数

	播放位置（秒）	工确认的画面时	来源
1	0.000	2026-08-03 ...	人工确认
2	29.000	2026-08-03 ...	人工确认

Save


Cancel

1. 在素材索引里选中录像，点“核验所选视频时间 / 框选 ROI”。
2. 读取画面，框选日期时间区域，识别后人工核对日期与时分秒。
3. 至少确认两个相隔较远的位置，再保存；单个读数只供粗定位。

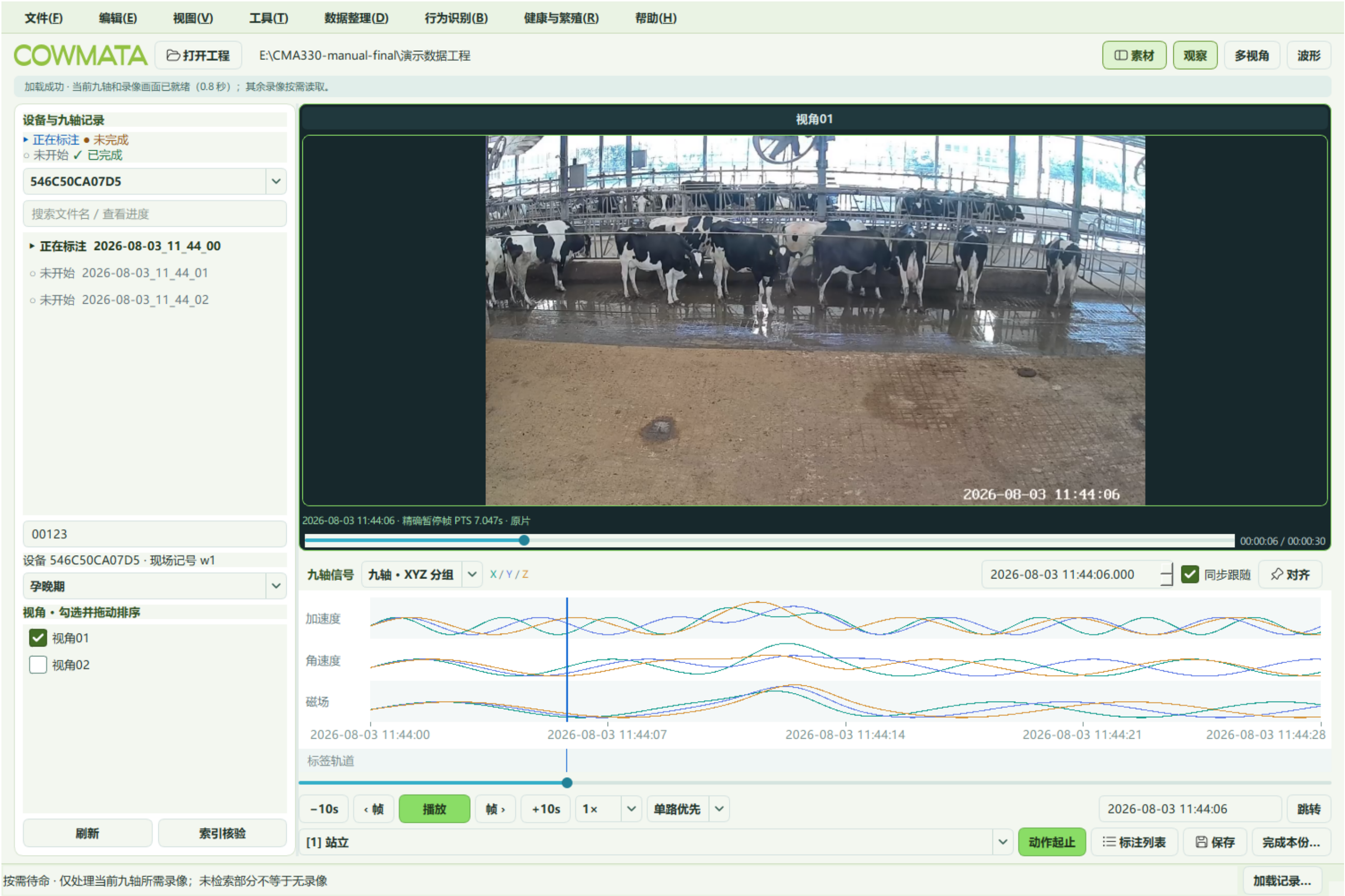


- 只勾选一个视角，或放大主视角；视频下方有独立播放进度条。
- 用1×、2×、4×播放观察；拖动进度条或输入日期时间后点“跳转”。
- 细看动作时暂停，用前后帧按钮定位；等实际画面到位后再标。

暂停首帧显示后会后台准备播放；首次完成后复用。异常音轨只在缓存中跳过，原片保留。

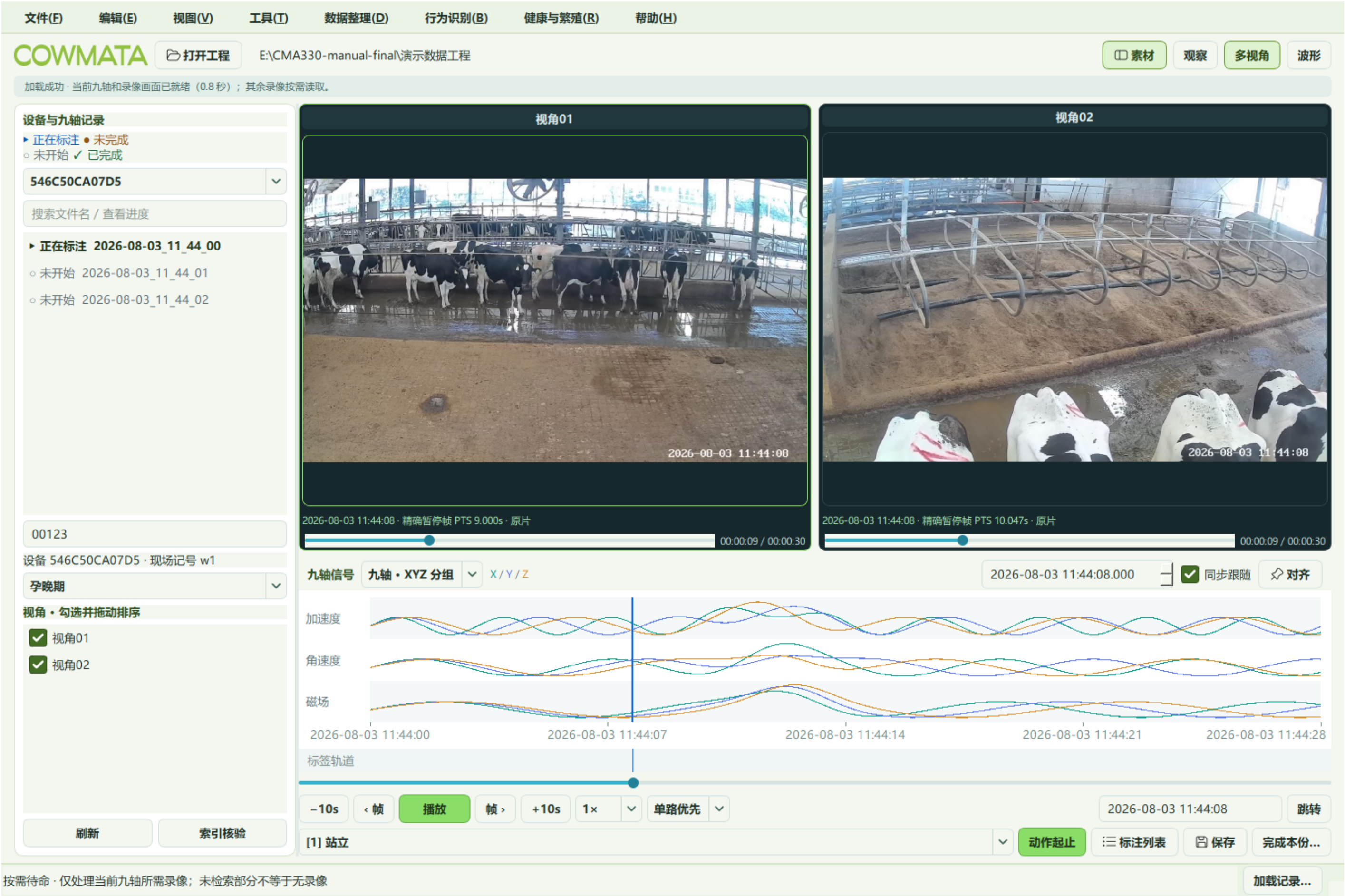

1. 左侧勾选所需视角，最多8路；拖动列表可调整顺序。
2. 顶部点“多视角”看网格；点击画面控件可设主视角或放大。
3. 暂停后核对各路同一参考时刻，避免把遮挡或未就绪的画面当证据。

“多路全速” 解码负担更高；切换视角不会自动重建九轴同步关系。

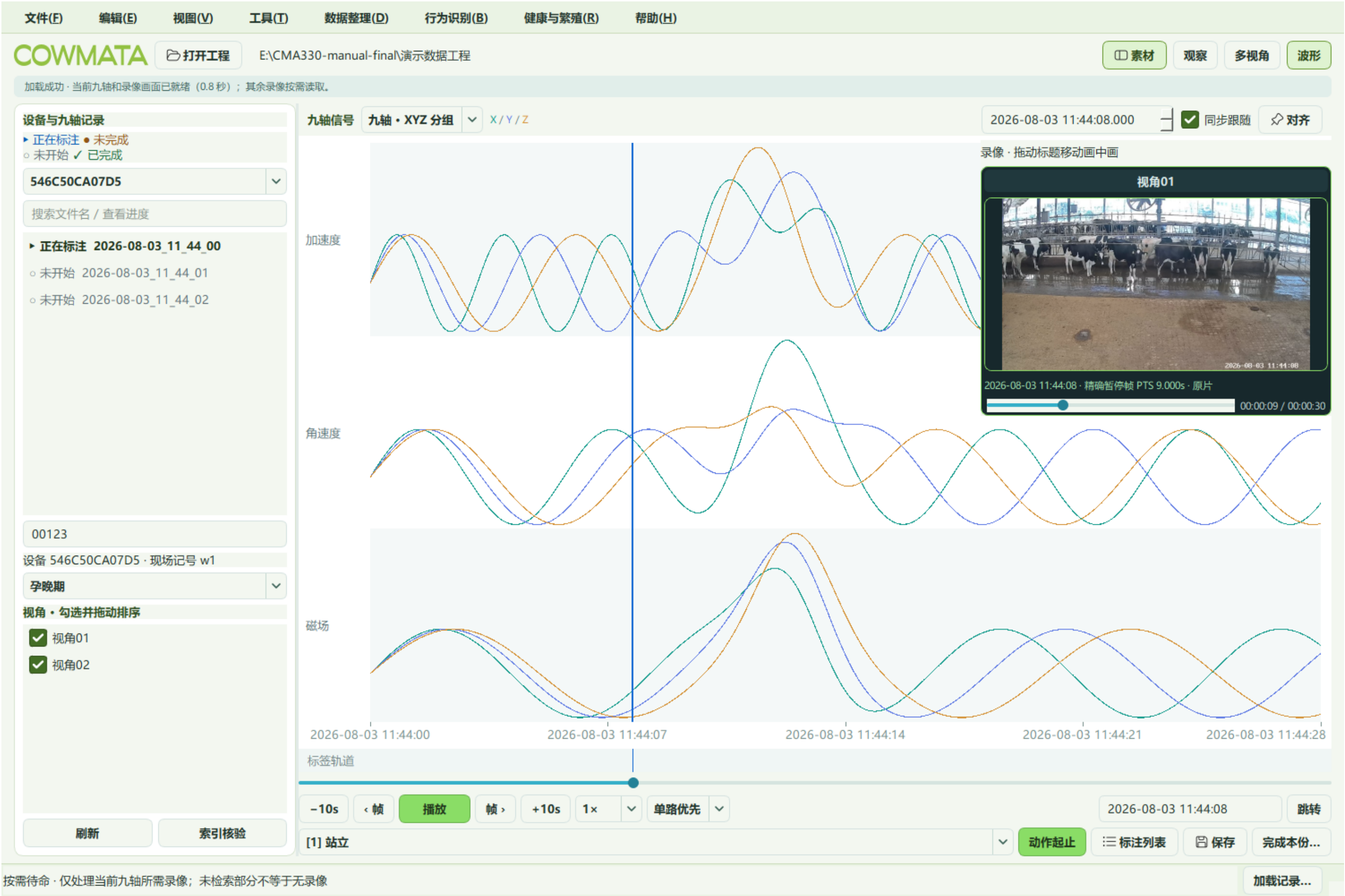

1. 点“波形”放大九轴，视频变为画中画；可拖动调整位置。
2. 九轴横轴和时间输入使用日期时间，便于与视频时间戳查找。
3. 在波形拖选区间供候选或片段导出；按F恢复整份九轴视图。

加速度、角速度和磁场用于辅助观察；波形变化本身不等于已发生某行为。

每行一对人工对应点。相邻点之间分段线性插值；首尾之外是外推。保存修订不会移动已有标签，已有真值需复核。

	九轴内部秒数	录像参考时间
1	8.0	2026-08-03 11:44:08
2	23.0	2026-08-03 11:44:23

增加锚点

删除选中锚点

未确认的九轴区间（秒）， 例如 100,200; 900,950；不跨这些区间确认真值

Save


Cancel

1. 找到同一个明确动作：把九轴光标和暂停视频分别定位到对应时刻，点“对齐”。
2. 在较远的另一个位置再核对并对齐；勾选“同步跟随”一起移动。
3. “工具 → 时间同步 → 九轴校准”可检查对应点；相机有时钟偏差时单独校准相机。

校准表使用九轴内部秒数表示对应点；修改同步后，已有真值需要重新复核。


41

先记录动作，再确认真值

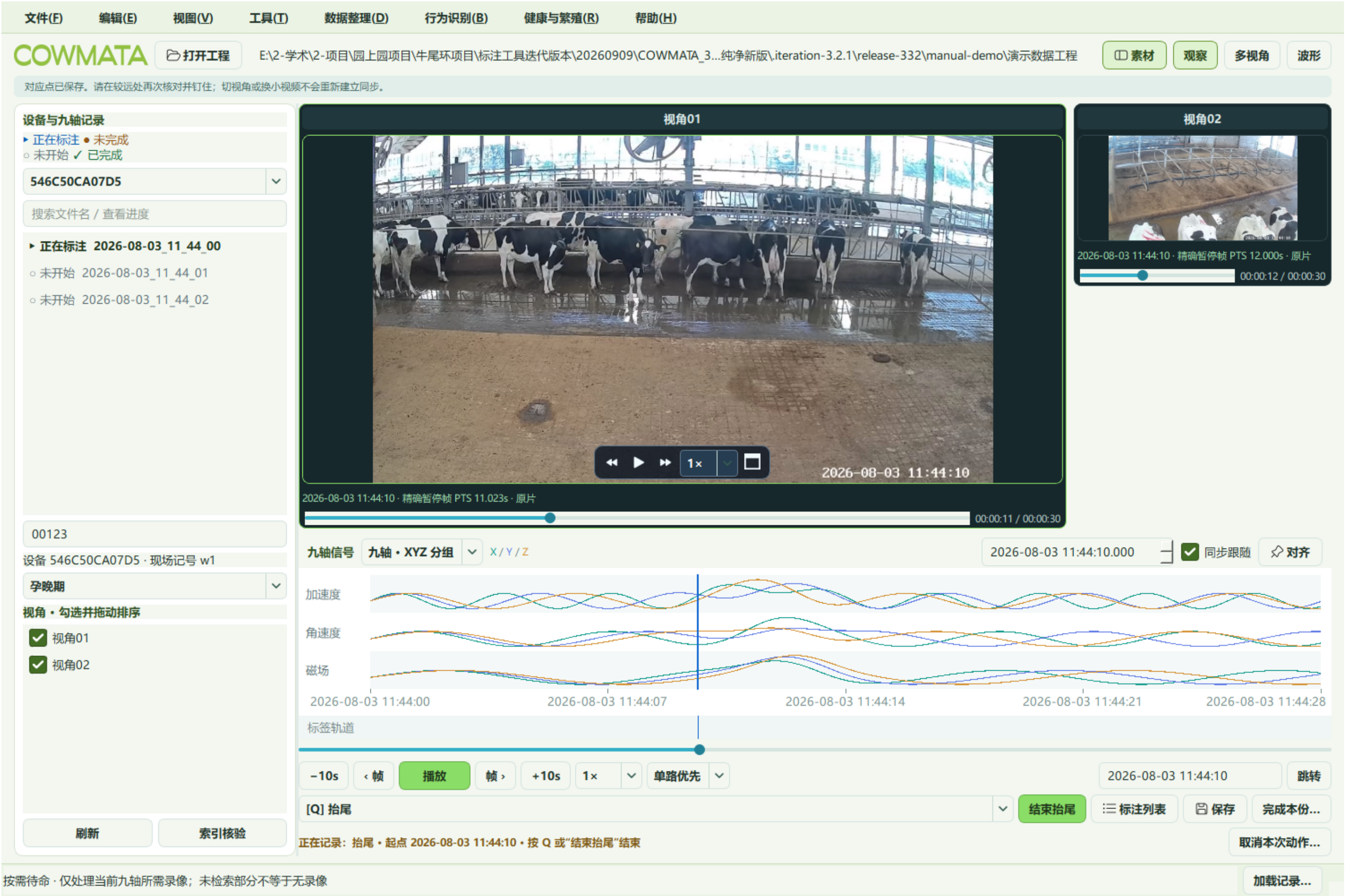

1. 选择行为，点击“开始...”记录起点，再点“结束...”记录终点；同一数字键也可操作。
2. 正在记录的动作名称、起点和结束键始终显示；误操作可点“取消本次动作...”并确认。
3. 打开标注列表查看视频草稿。草稿需调整边界、回看证据并确认，才成为真值。

模型候选与视频草稿均需人工复核；未观看或未确认的数据不能当成负样本。

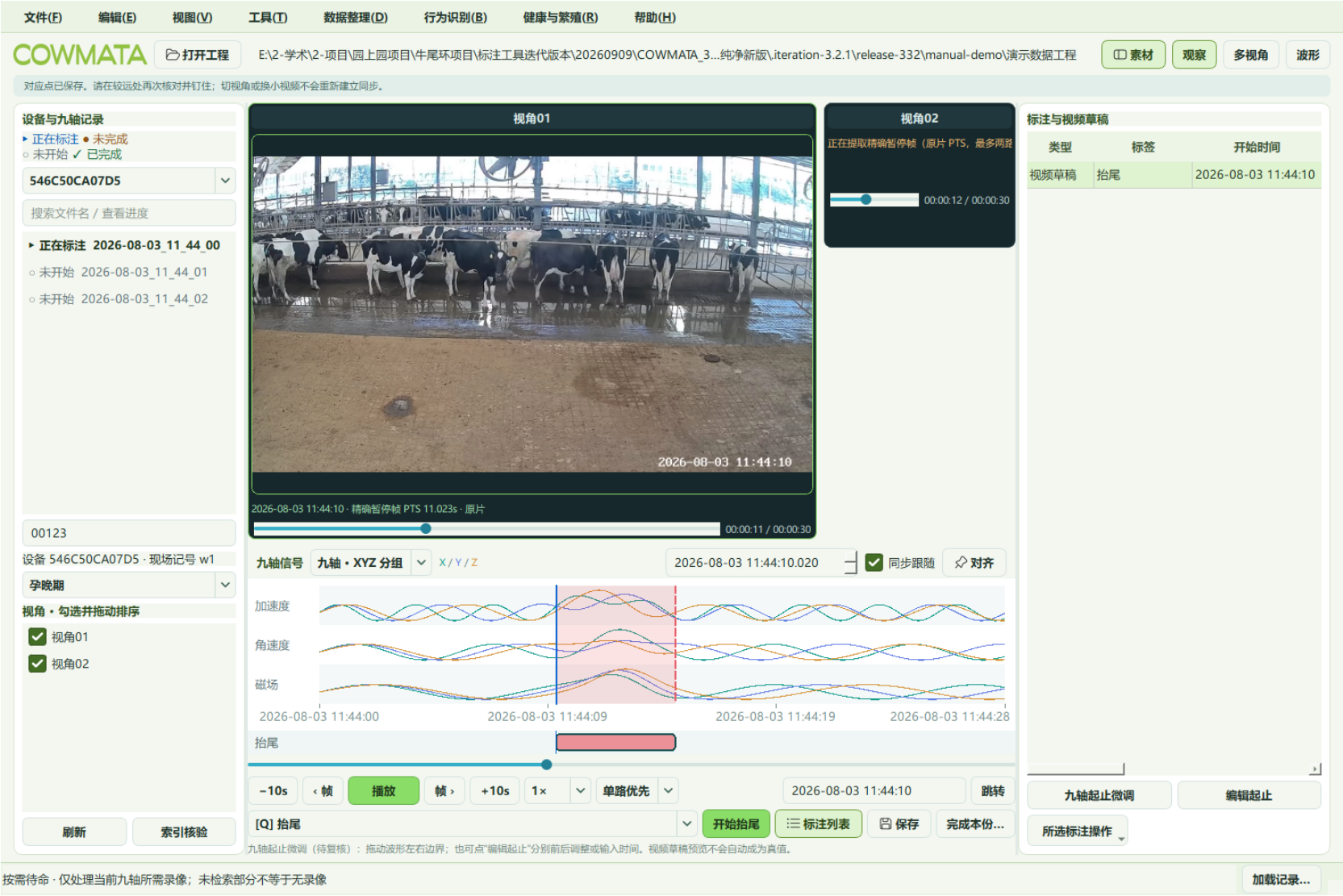

抬尾

调整九轴起止时间；点事件只记录起点。修改后仍需补充画面证据并复核。

开始时间

2026-08-03 11:44:10.023

开始 -0.1 秒

开始 +0.1 秒

结束时间

2026-08-03 11:44:15.047

结束 -0.1 秒

结束 +0.1 秒

备注

OK

Cancel

1. 闭合动作区间自动显示淡色背景；在标注列表选中草稿，点“九轴起止微调”。
2. 拖动波形左、右边界；“编辑起止”可分别 ±0.1 秒调整，或直接输入时间戳。
3. 回看调整后的起点、终点，补充画面证据并确认真值，最后保存。

虚线边界为待确认草稿，实线为已确认标签；颜色只帮助看范围，不自动确认为真值。

波形明显点只是建议；请确认画面中的目标牛和代表时刻。
从原录像提取同一对应时刻，不截图预览画面；保存后不会修改标签起止位置。

15.040 s · 原九轴位置

波形建议点

当前视频时刻

提取 / 更新图片

目标牛：00123 · 对应时刻 2026-08-03 11:44:15
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

视角01



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +6.5 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

视角02



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +53.1 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

已提取 2/2 个视角；请检查画面，缺失视角不会伪造截图。

☒ 我已核对代表时刻与目标牛；已了解缺失/遮挡视角，截图不替代整段录像

保存证据图

关闭

1. 确认真值后打开证据窗口，选择动作内最有代表性的时刻。
2. 点“提取 / 更新图片”，逐一检查目标牛、遮挡和缺失视角。
3. 勾选已核对，点“保存证据图”；导出成果时证据会一并带走。

图片从原录像提取；留存图片不替代整段录像，也不允许凭旧图确认新的动作。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

43 / 56

本份九轴标注结束，是否保存并标为已完成？

保存标签和当前位置后再继续。完成状态由你确认；未确认的候选仍需复核，已保存标签下次仍可编辑或删除。

保存并完成，下一份

已完成，保存退出

没做完，暂存退出

继续本份

是否保存工程后退出？

保存标签、标注进度和当前位置。此前自动保存的内容会保留；“不保存本次改动”仅放弃尚未写盘的更改。

保存并退出

不保存本次改动并退出

返回继续标注

1. 未做完可直接切换记录，工具自动保存标签和位置；回来会恢复进度。
2. 整份检查完后点“完成本份...”：保存并完成，或选择暂存退出。
3. 关闭软件会询问保存；完成状态由你确认，未完成记录继续保留。

左侧颜色区分正在标注、未完成、未开始和已完成。完成整份不代表候选已全部确认为真值。

拾尾

▼

视频草稿填日期时间；九轴标注填相对秒。点事件不填结束。

10.023256103515624

15.046511962890625

备注

OK

Cancel

1. 重新打开原工程，在标注列表选中一条，点击“编辑起止”。
2. 修改标签、起止边界或备注；也可删除，或用Ctrl+Z撤销、Ctrl+Y重做。
3. 修改后重新回看证据并确认，最后保存；已完成记录可重新标为进行中。

完整成果用于交换；日常继续编辑请打开原标注工程，不要在只读历史窗口中改标签。



完整成果...

所选片段...

训练数据...

- “文件 → 导出 → 完整成果”保存当前整份标注 JSON，便于交换和历史回看。
- 先选九轴区间，再用“所选片段”导出该段数据与标签。
- “训练数据”导出已确认事件、逐样本标签、BORIS、元数据和完整人工成果。

移动或发送成果时，把同级“证据”文件夹一起带走；类别、牛号与设备记录身份随成果保留。

历史回看 · 原始标注不会被改写

已校验证据图 2 张（仅供人工回看，不参与算法）

标注与视频草稿

拾尾 · 2026-08-03 11:44:10.023 – 2026-08-03 11:44:15.047 confirmed ·

勾选 1-8 个视角

☒ 视角01

☒ 视角02

重新选择数据工程...

连接归档录像...

留存证据图

主画面 + 辅画面

八路全速

目标牛: 00123 · 对应时刻 2026-08-03 11:44:15

静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

视角01



2026-08-03 11:44:15

实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +6.5 ms

1280 × 720 · 点击放大

沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

视角02



2026-08-03 11:44:15

实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +53.1 ms

1280 × 720 · 点击放大

沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

九轴信号

九轴 · XYZ 分组

X/Y/Z

加速度

角速度

磁场

2026-08-03 11:44:00

2026-08-03 11:44:07

2026-08-03 11:44:14

2026-08-03 11:44:21

2026-08-03 11:44:28

拾尾



播放

2026-08-03 11:44:10.023 · 已校准范围

1. “文件 → 历史回看” 打开导出的标注 JSON，选择标签定位查看。

2. 有原录像时重新连接数据工程；录像不在本机时切到“留存证据图”。

3. 若已归档录像，可连接并核验归档来源，再继续回看完整动作。

历史窗口只读，不覆盖当前标注；原片缺失与仅有证据图会明确提示。

实际程序截图 / 2026-09-13 / 演示标签不作研究真值

47 / 56

回传文件夹（可包含一层人员子文件夹；证据随成果一起复制）

选择回传文件夹...

☐ 自动发现回传成果，并提醒核对接收

☐ 自动接收核验通过、无冲突且明确已完成的整份成果

重新核验待处理成果

自动归入本工程的“标注工程”目录，不移动原始九轴和录像。冲突保留双方版本，缺失原始九轴或证据图时不接收。

Save

Cancel

1. “工具 → 多人协作 → 回传设置” 选择专用回传文件夹。
2. 将整份标注 JSON 和配套证据放入回传目录，可按人员设一层子目录。
3. 按提醒核对接收；只有明确完成、来源与证据核验通过且无冲突的整份成果可自动接收。

冲突保留双方版本，不覆盖已有人工成果；片段成果不能冒充整份完成。



1. 从“行为识别”选择行为，选单个视角和可用算法版本。
2. 点“运行算法”，双击结果定位九轴与录像，人工判断是否符合动作。
3. “选择对应人工标签”只切换标签类型；需要标注时仍要人工划定动作。

算法结果不自动写入人工标签；没有接入的行为会显示待接入。




1. “工具 → 事件候选预测” 选择版本和模型，扫描当前完整九轴。
2. 选中候选定位录像；可标为暂无法判断，或排除该候选。
3. 需要保留时，在九轴选好实际动作区间后建立视频草稿，再走人工确认流程。

分数不是概率，空结果不是负样本；演示九轴上的运行结果不代表模型实际准确率。



1. “健康与繁殖”中的发情、产犊、怀孕、疫病用于查看对应功能入口。
2. 显示“算法待接入”时不能运行，不会生成占位预测或健康结论。
3. 采集类别仍可手工选孕早期、孕中期、孕晚期等，继续自由标注通用行为。

采集背景、人工行为标签与算法健康结论是不同信息，不互相自动推断。

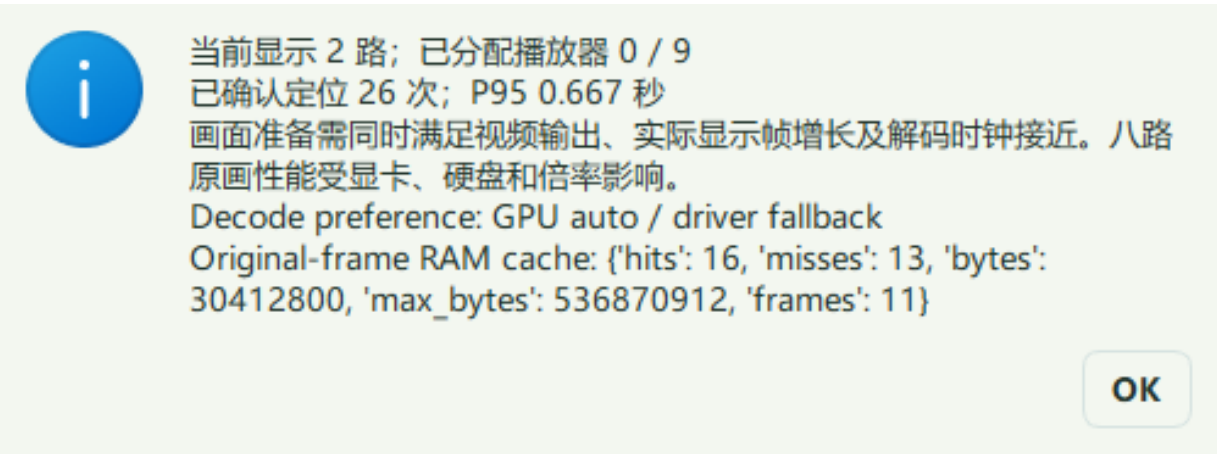

1. “视图 → 界面与播放设置” 调整波形高度、画中画大小及位置。
2. 按需勾选严格同步或监控兼容缓存；“视图 → 切换硬件 / 软件解码” 在重新打开工程后生效。
3. 播放异常时打开“性能诊断”，记录画面就绪时间、解码偏好与缓存信息。

先把完整录像复制到另一台电脑或归档磁盘，再选副本目录。
本工具核对原片与副本的 SHA-256；不会自动删除本机录像，也不会把缺失录像当作负样本。

选择归档副本，开始核验...

尚未核验。重要录像建议另留一份独立备份。


- ☐ 我已从归档副本抽查播放，确认可正常打开
- ☐ 我已导出并打开检查本批标签与证据图，确认没有漏标或漏存

保存核验记录

关闭

1. 在“工具 → 录像索引”打开“归档核验”。
2. 选择已有录像副本目录，执行核验并保存报告。
3. 核验通过后可用于历史回看；工具不会因归档核验自动删除原片。

保留原录像与已核验副本；缺失或身份不符的副本不能充当确认依据。

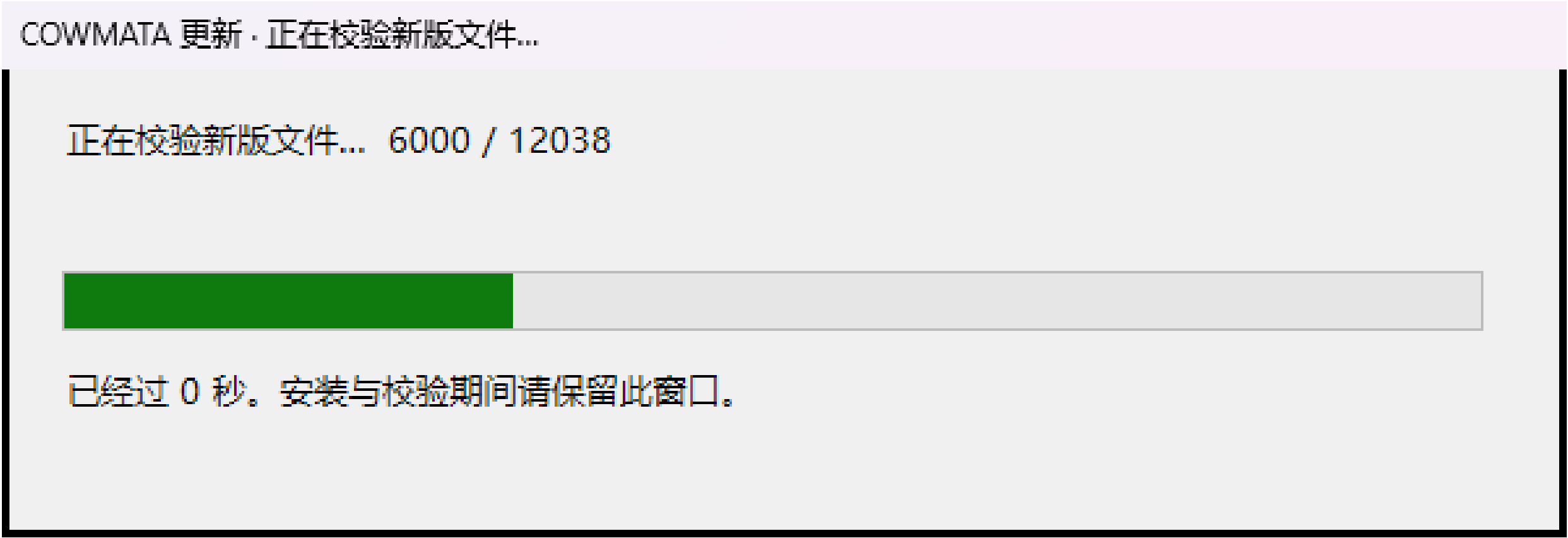

1. 在帮助菜单打开关于和版本更新；本教程与3.5.3发布包同步。
2. 更新过程有独立进度反馈，新版通过校验后先启动，再后台清理旧版。
3. 普通网络错误不影响已经打开的标注工作；更新后首次启动避免重复联网检查。

本次从旧版升级建议直接运行3.5.3安装包，后续采用新版更新流程。



- 1. 新数据先进入「数据整理」：选择采集类别，检查命名、审查并按日期归类。
九轴目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号；同设备跨日期复用分别保留。
- 2. 文件 → 打开工程：已有工程可直接打开；选择九轴后自动检索对应录像。
- 3. 核对设备、牛耳标、现场记号及时间同步，再观察录像并标注。
- 4. 点击「完成本份」确认保存；切换自动保存，重开恢复未完成位置。
- 5. 复核后在「文件 → 导出」输出完整成果、所选片段或训练数据。

未知录像的时间需要首次 OCR；文件编号只用于加速搜索，不是真值。未检索不等于无录像。未找到时可用「工具 → 录像索引 → 扩大当前检索」。
更新设置在「帮助 → 关于」；Ctrl+L 固定列表，悬停素材按钮可临时展开。

OK

- 1. Ctrl+O打开工程；Ctrl+J打开九轴；Ctrl+S保存；Ctrl+L固定或收起素材列表。
- 2. Ctrl+Enter完成本份；Ctrl+PageDown下一份未完成；Ctrl+Shift+O历史回看。
- 3. F1快速开始；F显示整份波形；F11全屏；Esc退出单路放大。

导入旧单视频工程...

打开旧版单视频窗口

1. 已有3.1或3.2标注工程可从“文件 → 打开工程”继续打开，先保留原工程备份。
2. 仅处理旧单视频标签时，使用“文件 → 旧版兼容 → 导入旧单视频工程”。
3. 导入前核对来源；旧的不明同步关系不会自动沿用，原标签仍需回看确认。

“打开旧版单视频窗口”是兼容入口；本手册常规流程使用当前多视角标注工作台。